


Hidasläpivirtauskaappi

Kaappi on suunniteltu materiaalien kuivausta varten rikosteknisissä sovelluksissa ennen DNA analyysiä. Kaappi on varusteltu irrotettavilla koukuilla materiaalien ripustamisen helpottamiseksi.

Kuivausvaiheen aikana tuloilma kiertää kaapissa 40 – 100 l/s riippuen kuivuvasta materiaalista, ja poistuu ulos poistoputken kautta. Ilmanvaihdon ohjausyksikkö käyttää antureita kaapin ilmavirran säätämiseen ja pitää paineen samana kuin kaapin ulkopuolella. Ilmanvaihdon ohjausyksikkö ei sisälly kaappiin.

Kaappi sisältää pesutoiminnon. Kylmää ja lämmintä vettä suihkutetaan vesisuuttimista, jotka sijaitsevat kaapin katolla. Viemäri sijaitsee kaapin pohjalla. Kylmän ja kuumen veden hanat toimitetaan kaapin mukana.

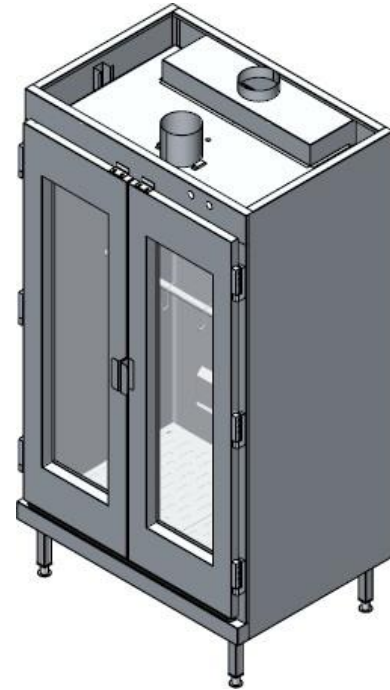

Tekniset tiedot

Materiaalit	Sisäpuoli ruostumaton teräs AISI 304 Ulkopuoli ruostumaton teräs AISI 304 Ovet karkaistua lasia, kehys ruostumaton teräs
Leveys	Vakioleveydet 600, 800, 1000, 1200 mm
Syvyys	Vakiosyvyys 845 mm
Korkeus	Vakiokorkeus 2250 sisältäen jalustan 250 mm
Kuljetusmitat	(leveys + 200 mm) * 900 * 2400 mm kaappi voidaan kääntää sivuttain
Ilmanvaihtoliitännät	Tuloilma d=160 mm Poistoilma d=160 mm, Hepa-suodatinkotelo valinnainen
Ilmanvaihdon ohjaus	Ulkoinen ilmanvaihdon ohjausjärjestelmä ei sisällytetty
Sähköt	Ei
Vesi- ja viemäri-liitokset	CW-12 Cu, WW-12 Cu Viemäri 50 liitäntä 2 tuuman ulkokierteellä
Valmistaja	KAVIKA OY, Tempo 4, 04430 Järvenpää, puh. 09 8362 0055, kavika@kavika.fi, www.kavika.fi