


Obduktiopöydät ja Dissektiopöydät

Obduktio- ja dissektiopöydät suunnitellaan ja valmistetaan aina tilauksesta asiakkaan tarpeet ja tila huomioon ottaen.

Ruumiinavauspöydän rakenne voi koostua yhdestä tai kahdesta moduulista, ja sisältää tarvittavat altaat, hanat, lisävarusteet sekä liitännät. Suunnitteluprosessissa on kiinnitetty erityistä huomiota ergonomiaan ja korkeaan hygieniaan. Kaikki pöydät ovat korkeussäädettäviä, siirrettävissä pöydissä on akkukäyttöinen korkeudensäätöjärjestelmä. Ruumiinavauspöytään voidaan yhdistää 10 asteen molemmin puolinen kallistus.

Ruumiinavauspöydän työtaso sisältää asiakkaan tarpeen mukaan syvät neliömäiset veriurat, ruumistuet tai rei'itetyt levyt. Kaikissa pöydissä on huoltoluukut, jotka mahdollistavat helpot huoltotoimenpiteet tarvittaessa. Pöytiin suositellaan asentamaan vesivuodon ilmaisin, joka on yhdistetty rakennusautomaatioon, yksiköiden pohjaan, joissa on vesi- ja viemäri-liitännät. Epämiellyttäviä hajuja voidaan minimoida ilmanvaihdon avulla. Ilmanpoisto sijoitetaan usein ruumiinavausyksikön ympärille tai rei'itettyjen levyjen alle.

Ruumiinavaushuoneen kalustusta voidaan täydentää näytehuuhteluasemilla, vetokaapeilla pöydillä ja vaunuilla.

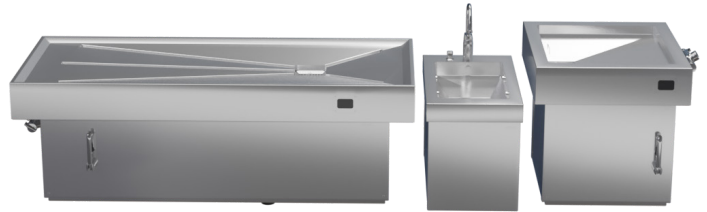

TEKNISET TIEDOT

Materiaalit	Haponkestävä teräs AISI 316 Avaustaso 1,5 mm teräslevy
Moduulivaihtoehdot	1-osainen 2-osainen
Mitoitukset	Päämitat piirustusten mukaan, räätälöitävissä
Kantavuus (obduktiotaso)	Vakio 250 kg, erikoisvahvisteisena 350 kg asti
Varusteet 1-osainen obduktiopöytä	Korkeudensäätöväli 300mm, obduktiotaso 700-1000mm dissektiotaso 850-1150mm 1 x Oras Care 5738F 2 x Oras Oramix 7267 + 2 x Oras Bidetta (kannakkeet x4) 1 x AGA Smartlet (Ø 10mm) paineilmalle 2 x IP55 pistorasia Allasritilät
Varusteet 2-osainen obduktiopöytä	<u>Obduktio-osa:</u> Korkeudensäätöväli 300mm 700-1000mm 1 x Oras Oramix 7267 + 1 x Oras Bidetta (kannakkeet x2) 1 x AGA Smartlet (Ø 10mm) paineilmalle 2 x IP55 pistorasia <u>Dissektio-osa:</u> Korkeudensäätö 300mm 800-1100mm 1 x Oras Oramix 7267 + 1 x Oras Bidetta (kannakkeet x2) 2 x IP55 pistorasia Allasritilät
Lisävarusteet	<u>1-osainen obduktiopöytä:</u> Ilmanvaihto Integroitu vaaka dissektiotasoon Kaasuliitännät Korkeudensäätö 400mm Muovinen leikkuulauta Erilaisia hanoja <u>2-osainen obduktiopöytä:</u> Ilmanvaihto obduktio-osaan Integroitu vaaka dissektiotasoon Kaasuliitännät Korkeudensäätö 400mm Muovinen leikkuulauta Erilaisia hanoja
Asennus	Suoristuspuolit jalkarakenteessa. Kiinnitys M10-pultein tai liimamassalla. Massaus jalustan ympärille (listoitus tarvittaessa).
Rakenteissa huomioitavat standardit ja direktiivit	EN 60204-1 Sähköturvallisuus EN 12100 Koneturvallisuus Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-Direktiivi 2014/30/EU Konedirektiivi 2006/42/EY
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy