


Kaatoklosetit 3076 / 3076V

Kaatoklosetteja käytetään viemärikel-
poisen kiinteän ja nestemäisen jätteen
huuhtomiseen viemäriin, useimmiten
terveydenhuollossa. Klosettiin voidaan
tyhjentää mm. kaarimaljoja, alusastioita
ja pulloja.

Kaatoaltaan pinta on sileä ja se on
asennettu siten, että jätteiden hyvä
huuhtoutuminen varmistuu. Huuhteluvesi
valuu altaaseen tasaisesti kaatoaukon
reunuksen alla olevasta suihkurenkaas-
ta. Jätteet huuhdellaan altaasta viemäriin
kosketusvapaan huuhteluventtiin avulla.
Käsi viedään takana ylhäällä olevan an-
turin päälle n. 80 mm etäisyydelle. Kaa-
toklosetissa on jalkapolkimella toimiva
pullosoihku, jonka avulla astiat voidaan
huuhdella kätevästi puhtaksi.

3076V-klosetin kaatoalue on viistottu
helpottamaan astioiden tyhjentämistä ja
parantamaan työskentelyergonomiaa.

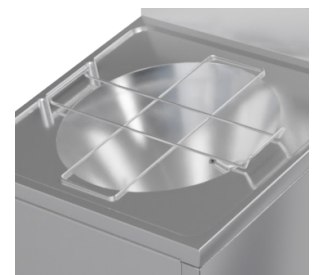

TEKNISET TIEDOT

Mallit	3076 Kaatoklosetti, kosketusvapaa, pullosuihkulla, LVI 5931017 3076V Kaatoklosetti, kosketusvapaa, pullosuihkulla, viisto, LVI 5931017
Materiaalit	Ruostumaton teräs AISI 304
Mallien mitat (leveys x syvyys x korkeus)	3076 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 800 mm) 3076/V 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 700 mm)
Varusteet	Saranoitu umpikansi Jalkapolkimella toimiva pullosuihku Muovinen hajulukko
Lisävarusteet	Saranoitu astiaritilä umpikannen sijaan Saranoitu kaatoaukollinen kansi umpikannen sijaan
Liitännät	Kylmävesiliitettä DN28-liitos (4,0–5,0 bar paine) Viemäriliitettä DN110 Sähköliitettä 230V (sähköpistoke 1,5 m johdolla laitteessa)
Huuhteluventtiili	Kosketusvapaa ohjaus, sisältää imusuojan
Huuhteluaika	Tehdasasetus 11 litraa / huuhtelukerta 15 sekuntia.
Asennus	Säädettävät etujalat, seinäkiinnitys ruuveilla, vesi- ja viemäriliitännät
Rakenteissa huomioidut standardit ja direktiivit	EN 60204-1 Koneturvallisuus EN 12100 Koneturvallisuus Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-Direktiivi 2014/30/EU Konedirektiivi 2006/42/EY
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy